

欧姆龙产品保证书

1. 欧姆龙产品从购买之日起, 凭购物发票享受一年免费保修。
2. 我方对因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。
如:
a) 擅自拆装、改装该产品而造成的故障;
b) 在搬运、搬运的过程中不慎跌落而造成故障;
c) 因缺乏合理的保养而造成故障;
d) 没有按照使用说明书的正确指示进行操作而造成故障;
e) 因非欧姆龙授权的维修店的不当修理而造成故障等等。
3. 保修范围外的维修服务, 将按规定收费。
4. 在要求提供保修服务时, 请垂询健康咨询室。
5. 在进行保修服务时, 如有需要, 可向由我方认定的合格技术人员提供产品电路图和可修理的元器件资料。
6. 保证产品停产五年内继续提供修理配件。

保修卡

产品型号: _____ 姓名: _____
 购买日期: _____ 地址: _____
 销售店名: _____ 邮政编码: _____
 地址: _____ 联系电话: _____

销售店的印章 _____

制造厂 电话: 0411-87614222 销售商 电话: 0411-87317201
 邮编: 116600 邮编: 116600
 欧姆龙(大连)有限公司 欧姆龙工贸(大连)有限公司
 大连经济技术开发区松江路3号 大连市保税区C-45-1号

联系电话
 欧姆龙(中国)有限公司(健康医疗事业)
 上海黄浦分公司 北京办事处 广州办事处 四川办事处
 电话: 021-63917557 电话: 010-65102030 电话: 020-87322117 电话: 028-86528210
 沈阳办事处 济南办事处 湖北办事处 福州办事处
 电话: 024-23258910 电话: 0531-86065601 电话: 027-82656435 电话: 0591-87674830
 江苏办事处 天津办事处 陕西办事处 杭州办事处
 电话: 025-86883940 电话: 022-24152575 电话: 029-87203477 电话: 0571-85775777
 哈尔滨办事处 重庆办事处 云南办事处 深圳办事处
 电话: 0451-53009751 电话: 023-63722252 电话: 0871-3571901 电话: 0755-83775811
 河北办事处 河南办事处 湖南办事处 广西办事处
 电话: 0311-86918255 电话: 0371-67717882 电话: 0731-4462595 电话: 0771-5879401




1628298-1 F

使用说明书

低频治疗器 HV-F124P

- 感谢您选购了欧姆龙低频治疗器 HV-F124P。使用前请务必阅读使用说明书, 并正确使用。
- 为了能够安全地使用本产品, 请您先仔细阅读使用说明书上的「安全注意事项」。
- 阅读后请妥善保管, 以便随时查阅、参考。
- 附有保修卡, 请勿丢失。
- 附录的「治疗手册」中有详细的使用举例, 敬请参考。

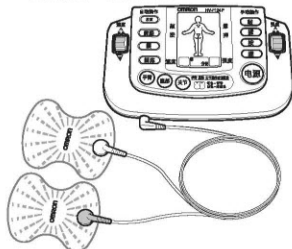

OMRON®

辽食药监械(准)字2007第2260043号
 注册标准编号 YZB/J 0055-2006 4
 (企业标准编号 Q/OMD 02-2006)
 辽食药监械生产许[2005]0124号

目录

务请阅读

安全注意事项	1
各部分的名称	3
使用前的准备	5

使用方法

使用方法(自动操作)	7
(手动操作)	10
使用后处理方法等	13

有关保修等

低频治疗的小知识	14
保养和保管	15
出现故障时	17
规格	17

附录 治疗手册

适用范围

适用于软组织损伤、肩周炎、腰肌劳损、神经末梢麻木的辅助治疗。

治疗的标准

时间: 一个部位每次10到15分钟
 次数: 每日1到2次。
 强度: 以舒服为准。

安全注意事项

- 说明书中所表示的警告记号和图例,目的是为了让您能够安全及正确地使用本产品,并防止对您及他人造成伤害。
- 警告记号、图例及其含义如下。

警告记号	含 义
△ 危险	表示错误使用时会带来导致人员伤亡或者重伤的危险。
△ 警告	表示错误使用时会有造成人员伤亡或者重伤的可能性。
△ 注意	表示错误使用时会有造成人员伤亡或者物品损坏的可能性。

*物品损坏是表示有关房屋、家产以及家畜、宠物的损害。

图例记号

	○ 符号是表示禁止 (不允许做的事情)。 具体的禁止内容在 ○ 中或在近处用文字或图画表示, 左图是表示“禁止拆卸”。
	● 符号是表示强制 (必须遵守的事情)。 具体的强制内容在 ● 中或在近处用文字或图画表示, 左图是表示“一般的强制”。
	符号的含义是B型设备。
	♻ 符号是电子信息产品污染控制标志。 表示本产品的环保使用期限为10年, 并且可以回收利用, 不应随意丢弃。不包括干电池。

△ 危险

请绝对不要与以下的医用电子设备一起使用:
 ①心脏起搏器等体内植入型医用电子设备②人工心肺等维持生命用医用电子设备。
 ③心电图仪等医用电子设备④如果患者在身上同时使用高频手术设备和治疗仪时, 在治疗仪按摩片位置可能引起烧伤, 也可能损坏治疗仪; 如果在短波或微波治疗设备附近使用(MM)治疗仪时, 本治疗仪的输出可能不稳定。
 - 会导致这些医用电子设备误动作。



△ 警告

下列情形, 请勿向医生咨询后使用。
 (1)急性病患者 (2)恶性肿瘤患者 (3)感染性疾病患者 (4)孕妇 (5)心脏病患者
 (6)高血压患者 (7)血压异常患者 (8)皮肤知觉障碍或皮肤异常患者 (9)其他正在接受医生治疗, 并感觉身体异常的患者等。
 - 会发生事故或引起身体不适。



请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔或阴道、皮肤疾患等部位使用。
 - 会发生事故或引起身体不适。

请勿与其他医疗器械同时使用, 以及在外涂剂(包括喷雾式外涂剂)等并用。
 - 会引起恶心或身体不适。



请不要用于治疗以外的目的。
 - 会发生事故或纠纷。

请勿把按摩片导线的插头插入本体导线插孔以外的地方(如: 电源插座插孔)。
 - 会导致触电或发生事故。



请勿擅自拆卸、修理和改造本体。
 - 会引起故障或触电事故。

治疗酸疼与疼痛时

选择键

揉的间隔可用「速度」旋钮进行调节。

一般认为稍低频率的刺激对于「酸疼」与「疼痛」具有疗效。



治疗难忍的疼痛时

选择键

轻抚的间隔可用「速度」旋钮进行调节。

一般认为高频率的刺激对于「疼痛」具有即效性, 对于突发性的疼痛则具有治疗的效果。



有关商品使用方法的疑问请垂询我们的健康咨询室

上海咨询室 电话: 021-63917557	北京咨询室 电话: 010-65171352	广州咨询室 电话: 020-87322115	四川咨询室 电话: 028-86528209
沈阳咨询室 电话: 024-23258910	济南咨询室 电话: 0531-86065603	湖北咨询室 电话: 027-82856656	福州咨询室 电话: 0591-87674829
江苏咨询室 电话: 025-66893941	天津咨询室 电话: 022-24152575	陕西咨询室 电话: 029-87203267	杭州咨询室 电话: 0571-85775948
哈尔滨咨询室 电话: 0451-53009751	重庆咨询室 电话: 023-63726722	云南咨询室 电话: 0871-3571933	深圳咨询室 电话: 0755-83665528
河北咨询室 电话: 0311-86918693	河南咨询室 电话: 0371-67717881	湖南咨询室 电话: 0731-4462578	广西咨询室 电话: 0771-5879402

神经末梢麻痹

如果是表皮神经末梢麻痹，请选择「脚底」进行治疗。

选择键 **脚底**

治疗程序：选择「脚底」。
治疗时间：同一部位使用
时间约30分钟以内。



脚底操作方式的治疗程序



按摩片的贴用举例

把按摩片贴于下面脚底的部位，会有
疗效。



软组织损伤

选择键

根据损伤程度不同，请参照上述各部位治疗方式选择相应的按摩键进行治疗。

注意事项

急性软组织损伤（由于用力过猛、因摔倒等造成急性扭伤、导致韧带出血、肿胀疼痛、或骨折等迹象）24小时之内不得使用本机。如有必要，请在医生指导下使用。

治疗酸痛与促进血液循环时

选择键 **脚**

脚的施度可用「脚底」按钮
进行调节。



治疗疼痛时

适当的强度刺激。

选择键 **按**

按的强度可用「脚底」按钮
进行调节。



注意

如果因本体异常而造成身体不适时，请立即停止使用。
如身体或皮肤如有异样的感觉，敬请向医生咨询并遵医嘱行事。

在按摩过程中，若需将按摩片移到相邻部位，请务必将电源关闭后再移动。
※有触电危险。

在按摩过程中，若需将按摩片给他人使用，请务必将电源关闭后再移动。
※有触电危险。

请勿将带有电子器械进行治疗。
※有触电危险。

请勿给儿童或无表达意识能力的人使用。
※会发生事故或引起身体不适。

请勿在潮湿等湿度高的地方使用。或者在接近水源处使用。
※会发生触电事故。

请勿长时间使用。
※有触电危险。

请勿在驾驶汽车时使用。
※有触电危险。

请勿长时间把按摩片贴在身体上。
※有触电危险。

在治疗中，请勿用皮带、项链等物与金属接触按摩片。
※有触电危险。

请勿在身体附近使用移动电话。
※有触电危险。

请勿在同一部位使用时间30分钟以上使用。
※有触电危险。

各部分名称

商品的构成

1 本体




2 按摩片 ■为消磁片



3 按摩片存放盒



4 导线 ■为导线品

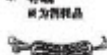


5 试用干电池 [7号干电池4节]



6 收藏软袋



7 使用说明书 (附收藏盒产品保证书)

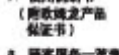


8 顾客服务—页表



9 合格证

本 体

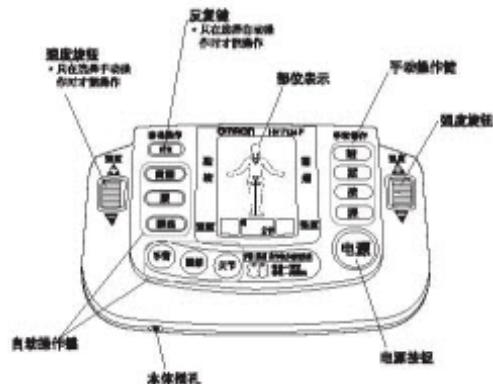

神经末梢麻痹

如果是下肢神经末梢麻痹，被选为治疗部位进行治疗。

选择键

治疗程序：选择「麻」，治疗时间：同一部位使用时间在30分钟以内。



下肢操作方式的程序



把红色头头的按摩片贴于腓肠系皮神经部位，白色头头的按摩片贴于足部神经部位（每一侧「麻」），是贴用药品。

按摩片的贴用举例

与感觉神经的感觉神经分布，把红色头头的按摩片贴于骨神经部位，白色头头的按摩片贴于足部的部位，会有效果的。




选择键

治疗程序：选择「麻」，治疗时间：同一部位使用时间在30分钟以内。




关节操作方式的程序

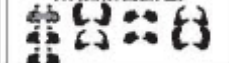

把红色头头的按摩片贴于腓肠系皮神经部位，白色头头的按摩片贴于足部神经部位（每一侧「麻」），是贴用药品。

按摩片的贴用举例

对于关节痛的治疗，把红色头头的按摩片贴于骨神经部位，白色头头的按摩片贴于足部神经部位，会有效果的。

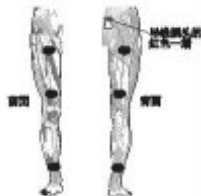

神经末梢麻痹

如果患上肢神经末梢麻痹，请选择相应的部位进行治疗。

选择键

治疗程序：选择「麻」。
治疗时间：同一部位使用
时间在30分钟以内。




上肢操作方式的治疗程序



把红色头头的按摩片贴于锁骨窝部的下侧。白色头头的按摩片贴于皮下脂肪部（腋下窝），是贴用的部位。

按摩片的贴用事例

考虑身体皮的感受神经分布，把红色头头的按摩片贴于锁骨窝部。白色头头的按摩片贴于皮下脂肪部，会有效果的。

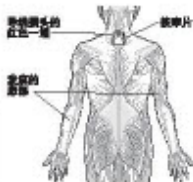


选择键

先以「1200Hz」的测量频率制疼痛。选择「麻」/「痛」/「震」的方式进行治疗，最后再以「麻」的方式进行刺激治疗。
治疗时间：同一部位使用
时间在30分钟以内。



关节操作方式的治疗程序

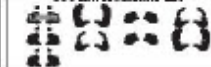

把红色头头的按摩片贴于锁骨窝部的下侧。白色头头的按摩片贴于皮下脂肪部（腋下窝），是贴用的部位。

按摩片的贴用事例

对于关节痛的治疗，把红色头头的按摩片贴于锁骨窝部。白色头头的按摩片贴于皮下脂肪部，会有效果的。




导线和按摩片



部位表示放大图

用最懂的形象显示治疗过程。

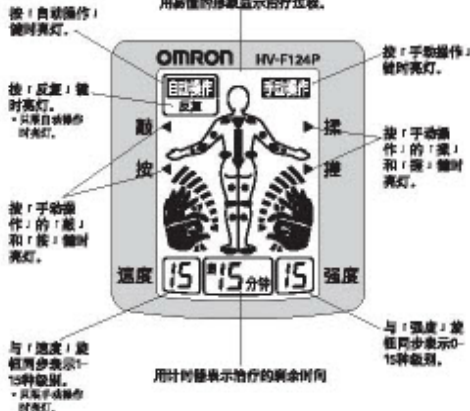


使用前的准备（装入电池，连接导线）

干电池的装入方法


1. 打开本体背面的电池盖



2. 确认干电池的正负极。
如图所示正确装入干电池

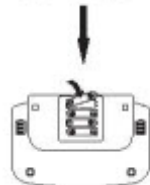

3. 合上电池盒盖

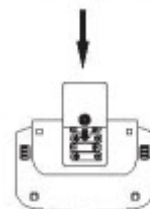

附录：治疗手册

本产品已用于使用说明书上。在使用本产品之前，请务必阅读使用说明书。

肩周炎

选择键 [肩周]

治疗程序：选择「肩」。
治疗时间：同一部位使用
时间在30分钟以内。



电极片的贴附举例

把电极片贴于下图的[贴附]部位。对于肩膀
将会有效果。

肩胛肌
(背阔肌)



肩周炎方式的执行程序



肩周炎程序

△△「左」刺激
△△「右」刺激
△△「左」刺激

△△「左」刺激
△△「右」刺激

腰肌劳损

选择键 [腰]

治疗程序：选择「腰」。
治疗时间：同一部位使用
时间在30分钟以内。



电极片的贴附举例

把电极片贴于下图的[贴附]部位。对于腰部
将会有效果。



腰肌劳损方式的执行程序



—刺激3次

出现疑问时

使用中发生异常时，请首先调查以下的问题。

疑问点	原因	处理办法
■感觉不到刺激 ■刺激很弱	■按摩片没有贴紧皮肤 ■按摩片粘贴面损伤 ■按摩片重叠贴在一起 ■导线没有正确连接 ■强度调节的太弱。 ■干电池能量耗尽。	→请把按摩片贴紧皮肤 (参照第8~11页) →按摩片是消耗品，请更换新的 (参照第9~12页) →请不要重叠使用按摩片 (参照第8~11页) →请正确地连接导线(参照第6页) →请调整「强度」旋钮 (参照第7~9页) →请更换干电池 (参照第5页)
■皮肤发红 ■皮肤有针刺地感觉	■治疗时间太长 ■按摩片没有紧贴皮肤了 ■按摩片粘附面脏污，干燥 ■按摩片粘贴面损伤	→减为10到15分钟左右 (参照第7~9页) →请把按摩片紧贴皮肤 (参照第8~11页) →用少量水边冲边用手指轻轻洗，自然干燥后再使用 (参照第15页) →按摩片是消耗品，请更换新的 (参照第17页)
■电源开不了	■把干电池的方向装错了	→请按正确方向装好。 (参照第5页)
■电源很快中断 ■使用中电源中断	■按摩片没贴在皮肤上 ■按摩片从皮肤脱落 ■干电池用完了 ■导线断了 ■开机15分钟电源会自动切断	→没贴上皮肤的话电源会自动切断 (参照第7~10页) →从皮肤脱落时电源会自动切断 (参照第7~10页) →更换电池 (参照第5页) →更换导线 (参照第17页)
■粘附面发粘	■出汗时使用了 ■长时间，或频繁地水洗了 ■放在高温多湿，阳光直射的地方了	→按摩片是消耗品，请更换新的 (参照第15页)

※如上述办法仍然不能解决的话，请与销售商联系或向欧姆龙健康咨询室咨询。

规格

名称：低频治疗器	使用温度湿度：+10℃~+40℃, 30%RH~85%RH
型号：HV-F124P	运输和保存温度湿度：-20℃~+60℃, 10%RH~95%RH
电源电压：DC6V (使用4节7号碱性干电池)	运行大气压力：860hPa~1060hPa
电池寿命：每天使用15分钟时约3个月 (负载阻抗1kΩ)	运输和保存大气压力：500hPa~1060hPa
输出频率：1~1200Hz	附属品：按摩片1组(2片装)，按摩片存放盒(1个)， 导线(1根)，软管(1个)，试用干电池(7号干 电池4节)，使用说明书(附欧姆龙产品保证书)， 顾客服务一览表，合格证，有毒有害物质或元 素含有表。
脉冲宽度：0~500μs	※本产品的规格若有变更，恕不预告。
本体尺寸：宽180mm×高48mm×厚118mm	
本体净重：约300克(包含干电池)	
按摩片尺寸：宽64mm×高83mm×厚1.1mm	

使用前的准备(装入电池，连接导线)

使用干电池时请注意

- 附带的干电池只是试用品，所以很可能在三个月内使用完。
- 干电池用完后请立即更换新的(同样种类)电池。
- 更换电池时建议使用7号碱性干电池。
- 长时间(3个月以上)不使用时，请取出干电池。
- 如果干电池长期放置，可能会导致漏液而引起机器故障。
- 请不要将新旧干电池混用。
- 请不要放错干电池的正负极。
- 有关使用方法，请阅读干电池上注明的注意事项。
- 使用后的电池的废弃方法请依照城市有关环境保护规定进行处理。

电池更换的标准

感觉按摩的刺激感减弱时，表示干电池即将耗尽，请更换新的干电池。

导线的连接办法



①把「导线本体端插头」插入「导线本体端插孔」。

②把「导线按摩片端插头」与「按摩片端按扣」接上。

有关导线的使用

- 请勿任意弯曲或拉长。
- 从本体拔出导线时应抓住插头拔出。

使用方法（自动操作）

治疗的基准

时 间：一个部位以一次15到25分钟为宜。

次 数：每天以1到2次为宜。

强度/速度：以调节至感觉舒服为宜。

※初次使用低频治疗时，建议由低强度开始，治疗时间缩短。

1. 接电源键




- 治疗在治疗程序的选择键（蓝色）按钮的操作实行后才开始。
- 如液晶画面显示3分钟以内还没开始治疗，电源会自动切断。

2. 选择治疗程序

有自动操作时，可从「肩膝」「腰」「脚底」「膝盖」「腰」「关节」中的程序进行选择。

例如：选择「关节」时的情景，「腰」「腰」「腰」「腰」「腰」等键会同时点亮表示。）

如下图所示，液晶画面显示电极片的贴附位置示意图。

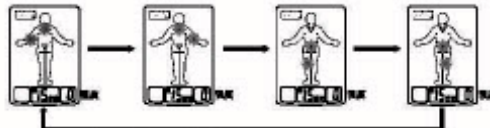

关节部分（膝部—腰）的键会同时点亮。

腰关节同时时膝部也会点亮，腰关节同时时膝部也会点亮。

保养和保管

本体

保养方法

- 请经常清洁本体。
- 关掉电源后，请务必把导线从本体和按摩片上拔下来进行保管。
- 本体如有脏污，请用干的软布进行擦拭。
- 如果本体特别脏，则可将软布沾有水或中性洗液剂，充分拧干后擦拭本体。必要时可用浸过医用酒精（酒精浓度为75%）的抹布进行清洁或消毒。
- ※壳体 and 滚轮可以用酒精擦拭，但是踏板不可以用酒精擦拭。
- ※请不要使用其它挥发性溶剂擦拭。
- ※请不要让水等液体流入本体内部。



保管注意事项

- 本体运行时，请勿用溶剂、汽油等进行擦拭。
- 请勿放在阳光直射、高温、潮湿、灰尘多、腐蚀性气体多的地方保管。
- 请放在儿童触摸不到的地方。
- 长期（3个月以上）不使用时，请取出电池保管。



※若您不遵守以上的注意事项及其它正确使用方法，本公司将不承担质量责任。

按摩片

保养方法

- 按摩片粘贴面应保持清洁，避免粘上灰尘、油性物、粘性物等污物，否则粘性会下降。
- 请把按摩片粘贴在存放板上进行保存，不要任意粘在其它物品上，避免损伤按摩片。
- 按摩片因脏污而使粘性下降时或皮肤有刺痛感时，用少量流水冲洗，同时用手指轻轻擦拭数秒，充分干燥后可暂时恢复其粘性。但若用水过多，则会使粘性下降。
- 请不要用纸巾、布等擦拭粘贴面。
- 请不要用指甲、刷子等刮伤粘贴面。



- ※ 按摩片的更换周期因人而异，大约50次左右。
- ※ 请不要频繁清洗，请不要使用洗涤剂、热水等。

保管注意事项

- 请勿放在阳光直射、高温、潮湿、灰尘多、腐蚀性气体多的地方保管。
- 请放在儿童触摸不到的地方。



3. 参考液晶表示贴上按摩片



· 初次使用时把按摩片从透明袋中取出时。



· 使用时请将按摩片从存放板上取下时。



· 水平放置按摩片，将红白标记固定与每个按摩片连接。

详细的使用事例，请参阅「治疗手册」。


肩膀/腰/膝盖顺序的贴用方法

1. 寻找按摩片端头，可分颜色（红或白）使用，请用按摩片贴紧患部。



肩膀/腰/关节顺序的贴用方法

1. 寻找按摩片端头，红色一端贴于骨头上，白色一端贴于疼痛的部位。

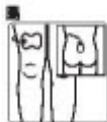

请将按摩片紧密的粘贴在皮肤上。

※ 将按摩片从皮肤上取下，约7秒钟后电源自动切断。

使用方法（自动操作）

使用按摩片时请注意

- 请勿重叠粘贴使用。
- 请勿将按摩片弯曲。
- 请尽量不用手指接触粘贴面。
- 沐浴后或者运动后等出汗时，请擦干净要按摩的部位后再使用。
- 如粘性下降时请妥善处理。
- 用水冲洗过的按摩片，让粘贴面自然干燥后再使用。

4. 开始治疗

将「强度」旋钮拨往「+」方向，治疗即开始。
「强度」可在0-15之间调节，故请选择适当的强度。
自动操作的速度不能调节，故「速度」也不显示。

例：选择「关节」时的情形



治疗内容会显示。

△注意

治疗途中若要把按摩片贴在其他部位时，务必将强度调回「0」后再贴，否则会受强烈刺激。



刺激在按「反复」键时重复，再按一次则回到原程序上。



- 治疗途中按「电源」键则治疗中断，电源切断。
- 治疗途中按摩片从皮肤脱落约7秒，电源则自动切断。
- 干电池将用完时，液晶画面全部亮灯，重复闪烁约30秒后画面消失。此时请按「干电池装入方法」的顺序更换电池。（参照第5页）

5. 治疗结束

治疗开始约15分钟后，电源会自动切断。

低频治疗的小知识

什么是低频？

所有的生命机体里，时刻都在发生某种特殊的电流。当然，人体也不例外。我们自身从心脏·脑·肌肉·神经等所有的部位发出不能感觉到的极其微弱的电流。这就叫「生物电」，它对身体的正常运行起着不可缺少的作用。所以生物电异常时，身体也就出现异常。

低频治疗的原理

（1）电极的构造

电流的流动结构

低频电流由（+）极进入并流向（-）极。电极中有右图所示的作用。

HV-F124P可自动地在（+）（-）两极之间切换。



（2）因频率而引起的不同作用

什么是频率？

就是对于身体来说一秒钟内施加电刺激的次数，用频率的单位「赫兹」（Hz）来表示。

频率升高时，由「敲」的感觉变为「揉」和「按」的感觉。HV-F124P发出1~1200Hz范围的刺激频率，能够更有效的减缓肌肉酸痛，疼痛等症状。




较低频率刺激的效果

对于慢性疼痛，肌肉酸痛·麻痹的症状有疗效，有促进痛感的抑制物质的分泌，以及促进血液循环的功效。

较高频率刺激的效果

对于急性疼痛的症状有效。与较低频率的刺激相比有即刻阻断痛感传达的优良功效。

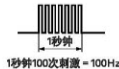

低频刺激治疗的原理

肌肉的泵式作用

由低频电流而引起肌肉的收缩或松弛。肌肉的泵式作用就开始动作。松弛的时候，血液就大量输入，收缩的时候，含有代谢物的血液就送出。这种动作循环往复，可促进血液运行流畅，血液循环畅通。



阻断痛感信号传达

在疼痛部位输入低频电流，作用于传达痛感的机能，脑内就难以接收痛感的信号了。

适于这种阻断机能的通电方法是在脊椎骨进行通电。

按摩片裸露放置，容易变脏而使粘性下降，所以治疗完成后请把按摩片贴在存放盒上

1. 关上电源，从本体上拔下导线插头



2. 从皮肤上取下按摩片

例：贴在肩上部



※抓住一角取下按摩片，请不要大面积接触粘贴面

3. 把按摩片轻轻贴在按摩片存放盒上



※连接按摩片的按扣可以一直放在按摩片上。

※请勿用力压按按摩片，会造成粘贴面损伤。


※请保持按摩片存放盒的清洁。

4. 将导线卷在存放盒上



※卷导线时应松紧适度。

5. 将本体与存放盒一起装入收藏软袋中

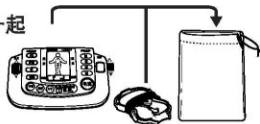

治疗的基准

时 间：一个部位以一次10到15分钟为准。

次 数：每天以1到2次为准。

强度 / 速度：请调节至感觉舒适为准。

※初次使用低频治疗器时，请适当把强度调弱，治疗时间调短。

1. 按电源键



约1秒钟全部亮灯。

※不能选择治疗程序。



闪烁表示时，便可选择治疗程序。



· 治疗在治疗程序的选择和「强度」按钮的操作实行后才开始。
· 如液晶画面闪烁表示3分钟以内还没开始治疗，电源会自动切断。

2. 选择治疗程序

在手动操作里，可从「敲」「揉」「按」「搓」中的程序进行选择。

例如：选择「敲」时的情形。

「敲」的部位会亮灯显示。



使用方法（手动操作）

3. 贴上按摩片



初次使用时把按摩片从透明袋中取出时。



使用时请将按摩片从存放板上揭下来。






水平放置按摩片，将红白按钮随意与每个按摩片连接。

详细的使用举例，请参阅「治疗手册」。

手动操作时按摩片的贴用方法

「导线按摩片端插头」可不分颜色（红或白）使用。
请把电极片贴于患部的两侧。

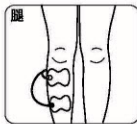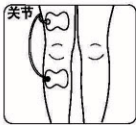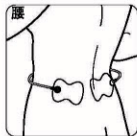

使用方法（手动操作）

使用按摩片时请注意

- 请勿重叠粘贴使用。
- 请勿将按摩片弯曲。
- 请尽量不用手指接触粘贴面。
- 沐浴后或者运动后等出汗时，请擦干净要按摩的部位后再使用。
- 如粘性下降时请妥善处理。
- 用水冲洗过的按摩片，让粘贴面自然干燥后再使用。

4. 「强度」旋钮拨向「+」方向时，治疗即开始

把「强度」旋钮拨向「+」方向时，治疗即开始。「强度」可在0-15之间调节，故请选择适当的强度。


△注意

治疗途中若要把按摩片贴在其他部位时，务必将强度调「0」后再贴。否则会感受到强烈刺激。



例：选择「敲」时的情形

手的影像会左右交互地显示出来。

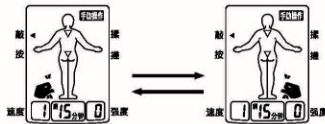

- 治疗途中按「电源」键则治疗中断，电源切断。
- 治疗途中按摩从皮肤脱落约7秒，电源则自动切断。
- 干电池将用完时，液晶画面全部亮灯，重复闪烁约30秒后画面消失，此时请按「干电池装入方法」的顺序更换电池。（参照第5页）

5. 调节速度

「速度」旋钮可在1-15之间调节，故请选择适当的速度。

6. 治疗结束

治疗开始约15分钟后，电源会自动切断。