

BF-L1103ML

聲寶相框體重計 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

姓名										男 女		出生日期		電話		住址									
購買日期										經銷商		店址		電話											

SAMPO

真實產品保證書

機號

臺灣相機體重計 BF-L1103ML

● 為維護您的權益，應即真實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sanpano.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯保登記表，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 天線、晶片、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保固範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※請務必填寫購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 本家產品使用於營利用途，其保單期限按保單書所載
- 保單書內容購買日期未滿或經多次更改與原物不符者，則失去
- 本產品售後服務部之中心公司
- 如有下列情形之一者，雖在保單期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或誤用錯誤，以致造成故障或損毀
 - 擅自改裝裝置或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錢包、帶、天線…等）

尊重真彩※

謝謝您的惠顧

電子信箱

𣎵

出生日期

男	女
---	---

年 月 日

까지

興縣志

購買日期

日			月			年			
---	--	--	---	--	--	---	--	--	--

請注意您的權益，應即詳實填寫購買日期並貼印章，於一週內上揭 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免郵回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，寄戶

留存聲請妥議保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、雷射、攝錄管、鏡頭、充電電池、熱感應頭、印表機、螢光燈管、燈泡、轉接片及其
- 它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

送站修理

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-郵箱-我是警寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

99 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 由於天災、火災或變人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（帶）、天線…等）

● 本產品售後服務委託獅子心公司

- 本實體產品僅用於醫療商業用途，其保證期限按保證書所載期限減半牢固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改與現物不符者，則失去保證書保證效力

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計在開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。




目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 7 保養方法
- 8 特別注意要點
- 9 關於售後服務

各部名稱

- ❶ 顯示/調整鍵
- ❷ 液晶顯示螢幕
- ❸ 電池盒 (內附CR2032 鋰電池)
- ❹ 強化玻璃表面)
- ❺ 選單鍵
- ❻ 腳墊 (共4個)

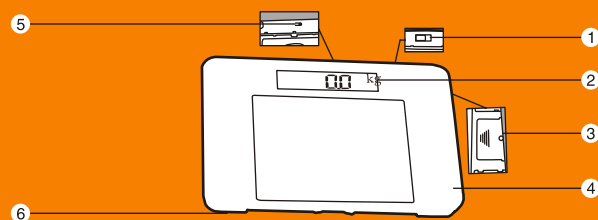



保養方法

更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現“LO”時，打開電池蓋用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬取出，再將(本機使用3V CR2032 鋰電池)的“+”面朝上裝入，聽到“咔”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖15、16)

※若在測量時螢幕出現“Err”，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。

※秤重超過150kg，LCD將顯示“Err”；電力不足時，LCD顯示“LO”，請更換電池。

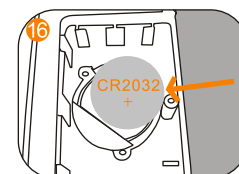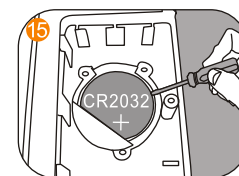


機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，因玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

D.秤重功能：

- 將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時秤體螢幕會亮起橘燈且畫面會從時間畫面轉變成秤重預設畫面(8888)後，此時秤體就會從預設測量單位(0.0kg)轉變成所測得的體重，若數秒後不碰觸秤體，螢幕顯示會消失並返回時間計時畫面。(如圖13、14)


※因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。

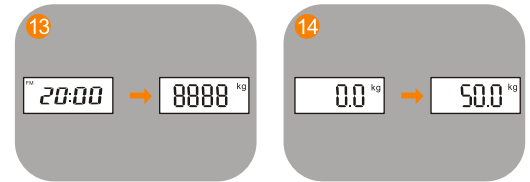

使用方法

A.時鐘使用：

- 將秤翻轉至背後，打開電池盒蓋，把絕緣片抽掉後，把電池盒上蓋尾端三個突點對準盒上三缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 此時螢幕會顯示"12:00"畫面，且畫面中的"12"會開始閃爍，請按下秤體右上方"顯示/調整鍵"，設定完畢後；再按下秤體背面的選單鍵，開始設定"分"，設定完畢後，再按下"顯示/調整鍵"，即可完成時間設定。(如圖3、4、5)
- ※注意1：若沒有馬上設定時間，時間會由中午12點開始計時；若要設定時間，長按選單鍵(此時"12"開始閃爍)，再按下顯示/調整鍵依序設定時間。
- ※注意2：本秤體時間為12小時，但螢幕左上角會隨時間改變顯示"AM"(上午)或"FM"下午做區分。
- 時間設定完畢後，可將秤體後方的掛勾孔掛於牆壁，可當壁鐘使用。(如圖6)

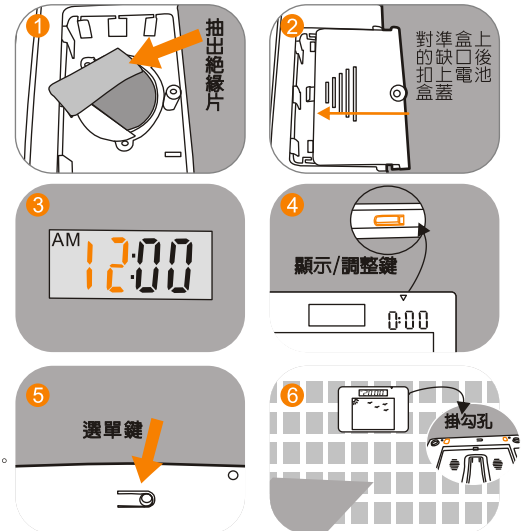

B.溫度顯示：



- 另按下顯示/調整鍵後，螢幕會從時間顯示轉換成“— — —”，幾秒後顯示目前室內溫度。(如圖7)

[溫度數值以攝氏(°C)顯示]

- 再按下秤體背面的選單鍵，溫度數值會以華氏(F)顯示。(如圖8)

※1.注意：當按下顯示/調整鍵一段時間後，螢幕會自動跳回時間顯示模式。

※2.攝氏(°C)與華氏(F)換算方式為： $F = (°C) \times 9 \div 5 + 32$ 。

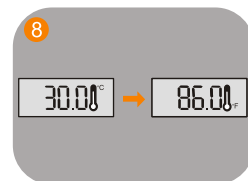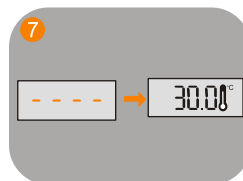

使用方法




C.相框功能：

- 將秤體翻轉至背面，雙手於秤體背面中央左右兩橢圓狀處往下壓，即可打開相框蓋。(如圖9)
- 可放入自己喜歡的圖片或照片於相框盒內，再將相框蓋往上推至聽到“咔”一聲，表示完成。


(如圖10)

注意：放入照片或圖片時，照片或圖片需以正面放入秤體中。

- 將中央固定架從秤體中拉出，即可將相框至於桌面上當桌框使用。(如圖11、12)

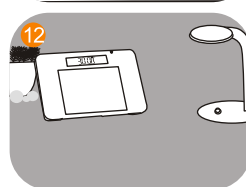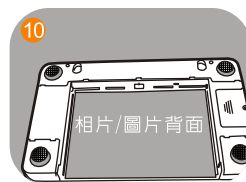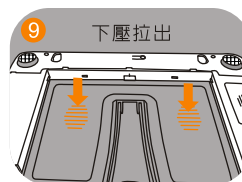

額定電壓	DC3V	淨重	0.67kg	使用電池	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W240XD155X25H (mm)				

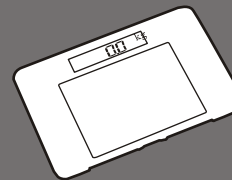

廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地丟棄電池(請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

關於售後服務

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。