

聲寶股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

健康足部按摩機 使用說明書

ME-W503L

User Manual

電源	額定功率	額定電壓
AC 110V/60Hz	20W	110V

淨重	外型尺寸	生產國別
約5kg	W475 X D270 X H160 (mm)	中國



規格

電源供應 AC 110V/60HZ
額定功率 20W

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。

小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
 若有任何疑問，請洽詢經銷商。

目錄


2	本機特點	8	保養方法
3	各部名稱	9	故障排除
4	安裝方法	10.	緊急處理方法
5	使用前須知	13.	關於售後服務
6	功能操作		
6	開機/關機		
6	正轉/反轉		
6	按摩速度		
6	自動關機		
7	按摩部位		

本機特點

- 具按摩/揉捏雙重功能
- 特殊滾筒式按摩器-可刺激腳部的任何部位
- 八段式滾輪速度調整
- 正、反轉雙向轉動滾筒
- 適肩背部、腰部、腿部、腳部全方位按摩
- 開機後15分鐘自動關機之貼心功能
- 舒緩肌肉酸痛促進血液循環

各部名稱

1. 速度指示燈
2. 速度▼鍵
3. 速度▲鍵
4. 正轉/反轉鍵
5. 電源鍵
6. 電源指示燈
7. 正轉/反轉指示燈
8. 滾輪
9. 電源線

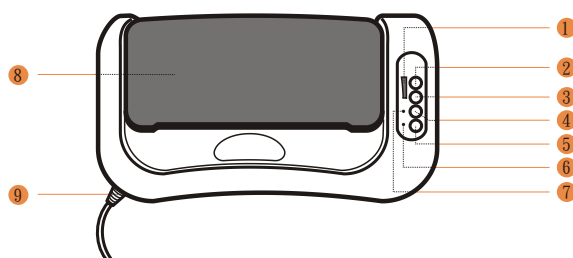

安裝方法

安裝步驟

- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 安裝、拆開配件或不使用時，請先將電源關掉再將插頭拔掉。
- 請勿在靠近火源和有易爆物品區使用本產品。
- 請勿在毛毯或枕頭底下操作，過熱會引起火災或觸電。
- 不可自行拆裝、修理，以防止產品發生故障而造成危險。

使用前須知

- 如身體不適、近期動過手術或背部受傷患者，請在使用本產品前先向醫生諮詢是否可使用。
- 下列情況使用者，使用前請先徵求醫生同意：
 1. 心臟病患者或心臟衰弱者。
 2. 惡性腫瘤患者或急性病患者。
 3. 孕婦或習慣性流產者。
- 嚴禁小孩或智能障礙者獨自使用時，請讓有操作能力的人督促陪伴使用。
- 飯後一小時內請勿使用。
- 無布罩時請勿使用本機，以免使用時造成不必要傷害。
- 拆除布罩前，請先拔掉電源。

功能操作

開機/關機

- 開機：按下 **電源鍵**，"電源指示燈"亮，表示本機已開機即可使用。
- 關機：按下 **電源鍵**，"電源指示燈"滅，表示本機已關機。

正轉/反轉

- 反轉：按下 **正轉/反轉鍵**，此時"正轉/反轉指示燈"亮，滾輪方向(按摩方向)即由正轉換成反轉。
- 正轉：按下 **正轉/反轉鍵**，此時"正轉/反轉指示燈"滅，滾輪方向(按摩方向)即由反轉換成正轉。

按摩速度

- 滾輪速度(按摩速度)共有八種可調。
- 按 **速度▲鍵** 或 **速度▼鍵**，可依個人需要調整滾輪速度(按摩速度)快慢。調整時，"速度指示燈"會隨之往上升或往下降。

自動關機

- 開機後，本機會自動定時，15分鐘後自動關機。

按摩部位



- 腳底



- 腳踝



- 小腿



- 手部



- 腰部

保養方法

- 布罩清洗時，請先將電源拔除，再將後面的拉鍊拉開抽取出來清洗。曬乾後才能將布罩套回。
- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨林或灰塵過多的場所。需將本機放在清涼、通風的地方。
- 請勿讓水進入本機內，以免發生故障。
- 請勿將電源線繞在本機上。

故障排除

- 本機不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。

緊急處理方法

- 有燒焦味或發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.9，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091