

User Manual

ME-D805CL

舒壓按摩棒使用說明書

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填寫購買日期，以確保您的權益

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60HZ	25W	980g

外型尺寸
W410xD98xH125(mm)

各部名稱

- ① 遠紅外線燈罩
- ② 遠紅外線燈罩
- ③ 按摩頭
- ④ 電源開關
- ⑤ 電源線
- ⑥ 短毛式按摩頭
- ⑦ 長毛式按摩頭

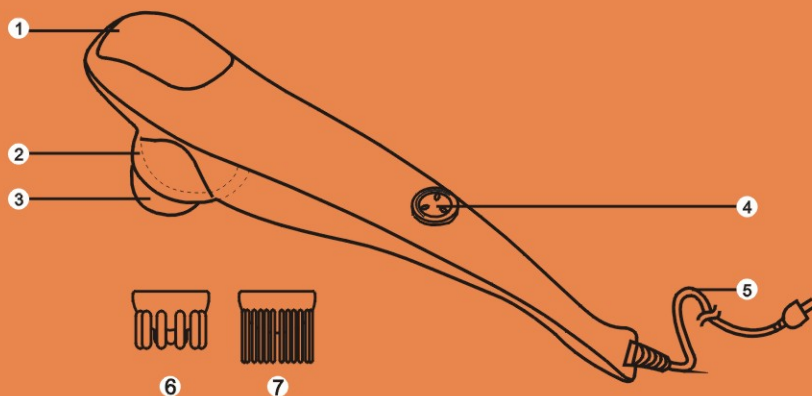

聲寶股份有限公司 · 聲寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

建議使用部位



背部按摩



肩部按摩




手臂按摩



大腿按摩



小腿按摩

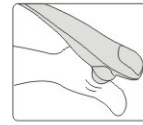

腳底按摩

使用說明


- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 將電源開關依順時針方向旋轉開啓(如右圖)，並調整強度。
- 將按摩棒放置於欲按摩之部位上即可。
- 無段式按摩強度微調效果：
本機開機後，可依旋轉鈕調整方向設定按摩強度：順時針方向漸強，逆時針方向漸弱。




- 遠紅外線溫熱效果：
啓動1~2分鐘後，產生溫熱之遠紅外線效果，可促進血液循環順暢，達到按摩與消除疲勞的功效。

- 2種按摩頭可拆換：
使用者可依個人需求選擇按摩模式(更換按摩頭時必須先將電源關閉)：
短毛軟質按摩頭-使用(圖一)按摩頭，利用高低速震動的特性，以具有彈力的按摩效果舒緩肌肉的緊繃與痠痛感，適合全身按摩。
長毛軟質按摩頭-使用(圖二)按摩頭，利用高低速震動的特性，能貼合身體部位按摩促進新陳代謝，適合頭部按摩。

- 按摩力道強勁：
前寬後窄之流線形長握把設計，可提升針對身體各部按摩之效能。

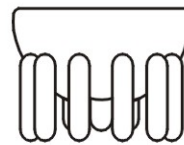

(圖一)

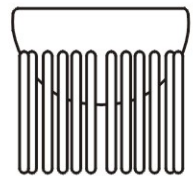

(圖二)

- 建議使用時間：
本產品建議使用時間為30分鐘，需連續使用時需要間隔10分鐘後再繼續使用。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	將電源開關順時針方向旋轉
開機後有異音	內部零件故障	送修處理
突然停止工作	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號
售後服務專線：04-24180315