

User Manual

ME-R407L

健康按摩機 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

健康按摩機 ME-R407L

機號 9

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名

出生日期

男 女

年 月 日

電話

電子信箱

住址

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其
它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

◎送站修理
※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ●新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)328299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未真實或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障原因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)


※注意事項

電源 | AC110V 50Hz

耗電量 | 33W

重量 | 4.55Kg

產品尺寸 | 長 450mm x 寬 290mm x 高 200mm

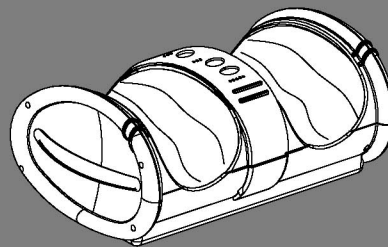


目錄

- 2 構造名稱簡介
- 3 功能簡介
- 4 使用方法
- 8 保養及注意事項

構造名稱簡介

- 1 電源／開頭
- 2 指示燈
- 3 控制按鍵
- 4 提把

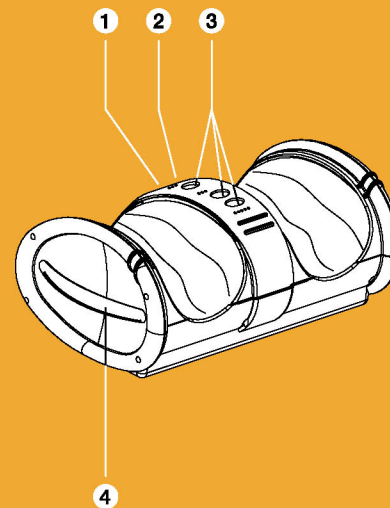

功能簡介

功能簡介

- ME-R407L是一台造型獨特、使用舒適的健康按摩機。它主要是模仿人的雙手按摩方式對您的腳底、小腿以及手腕來進行揉捏按摩，促進血液循環，排除體內濁氣，從而達到消除疲勞、恢復體力、永保青春健康之功效。

使用方法

操作使用方法

- 將插頭插上電源。
- 打開電源開關“TIME”，開始操作各功能。
- 使用時如要關機，按下“TIME”鍵，直到產品停止運作。

按鍵說明

- TIME鍵(開關與定時鍵)：指示燈為綠、黃、橙，LED分別代表：10、20、30分鐘定時。按第一下綠燈亮為待機狀態，同時定時10分鐘；按第二下黃燈亮，定時20分鐘；按第三下橙燈亮，定時30分鐘；按第四下燈全部滅，產品停止運作。此鍵不開時，其他任何功能鍵都無法作用。在20、30分鐘定時時，每過10分鐘，指示燈向下跳一步。

例：30分鐘定時，橙色LED亮，定時時間過10分鐘後指示燈橙色滅，黃色燈亮，再過10分鐘，黃色燈滅，綠色燈亮，再過10分鐘燈全滅，產品停止運作。自動模式的定時也同此。

按鍵說明

- SPEED鍵（手動調速鍵）指示燈1綠、2綠、3橙、4橙、5紅，LED為5檔調速，在TIME鍵開機後，按第一下，綠一個燈亮，為1檔；按第二下，綠、綠二個燈亮，為2檔；按第三下，綠、綠、橙三個燈亮，為3檔；按第四下，綠、綠、橙、橙四個燈亮，為4檔；按第五下綠、綠、橙、橙、紅五個燈亮，為5檔；按第六下，綠一個燈亮，為1檔，如此迴圈。此鍵在自動模式下無法作用。
- AUTO鍵（自動模式鍵）：指示燈為綠、黃、橙，LED共3個自動模式，在TIME鍵開機後，無論手動為幾檔，按第一個綠燈亮為自動模式1，按第二下黃燈亮為自動模式2，按第三下橙燈亮為自動模式3，按第四下綠、黃、橙全滅，恢復為手動模式（進入自動模式前，手動模式為第幾檔，退出自動模式後，手動模式就為第幾檔）。

自動模式

1. 自動模式1：共有5段速度（依序為1→2→3→4→5）進行2次輪迴運作，共計10分鐘。自動模式運行時，SPEED鍵無法操作。
2. 自動模式2：共有5段速度（依序為2→4→1→3→5）進行2次輪迴運作，共計20分鐘。自動模式運行時，SPEED鍵無法操作。
3. 自動模式3：共有8段速度（依序為1→2→3→4→5→4→3→2）進行20次輪迴運作，共計30分鐘。自動模式運行時，SPEED鍵無法操作。

保養及注意事項

- 注意電壓標準，切不可插錯電源。
- 請勿拉電源線，以免造成線斷或接觸不良。
- 有高血壓或心臟病患者請慎重使用，或在醫師指導下使用。
- 懷孕的婦女與月經來潮者時請勿使用。
- 防止水份濺入開關上或按摩器上，以免觸電。
- 請勿置於高溫處或有灰塵的地方。
- 日常保養請用中性洗滌劑及軟性抹布，不可用機油或有機溶劑。
- 使用半個小時讓機器停10分鐘，以確保機器的壽命。
- 如按摩器發生故障，請送相關部門維修。
- 不可在喝酒之後使用。
- 使用中，如感到噁心請停止使用。
- 用餐後的一小時之內，請勿使用。